

DEVITA BRT

БИОРЕЗОНАНСНАЯ ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ

**ЦИФРОВОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЕАНСОВ
ЭНДОГЕННОЙ БИОРЕЗОНАНСНОЙ КОРРЕКЦИИ ОРГАНИЗМА**

УПРАВЛЯЙ СВОИМ ЗДОРОВЬЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНО

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МЕТОД ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



**ПЕРСОНАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА
ОРГАНИЗМА**



**АКТИВАЦИЯ РЕЗЕРВОВ
АДПТАЦИИ**



**БЫСТРОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ОРГАНИЗМА**



DEVITA BRT

БИОРЕЗОНАНСНАЯ ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ

УПРАВЛЯЙ СВОИМ ЗДОРОВЬЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО

- НЕБОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС
- ЗАРЯЖАЕМЫЕ ВСТРОЕННЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ
- НЕОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
- СОВМЕСТИМ С НЕКОТОРЫМИ ПРОГРАММАМИ DEVITA RITM И DEVITA ENERGY
- ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОДНОГО СЕАНСА – 20 МИНУТ






DEVITA BRT

БИОРЕЗОНАНСНАЯ ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

БИОРЕЗОНАНСНАЯ ТЕЛЕМЕТРИЯ (BRT) – коррекция состояния здоровья с использованием собственных электромагнитных колебаний человека.

ИНВЕРСИВНЫЙ РЕЖИМ DEVITA BRT – запись, усиление и переворачивание патологических электромагнитных колебаний организма создает нейтрализующее взаимодействие патологических и коррекционных колебаний и восстанавливает здоровые физиологические колебания организма.

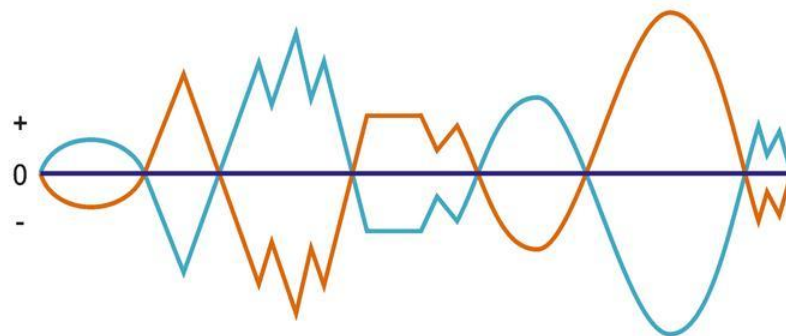

- Патологические колебания
- Коррекционные колебания (перевернутые на 180° патологические колебания)
- Физиологические колебания

ИНВЕРСИЯ (от лат. Inversio – переворачивание, перестановка) – метод, созданный ученым-врачом Францем Мореллем и инженером–электронщиком Эриком Раше в середине XX века.



DEVITA BRT

БИОРЕЗОНАНСНАЯ ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ

БИОМЕХАНИЗМ ВОЗДЕЙСТВИЯ



ЭФФЕКТИВНО



БЕЗОПАСНО




ФИЗИОЛОГИЧНО



УДОБНО

СЧИТЫВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КОЛЕБАНИЙ ЧЕЛОВЕКА И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ТОЧКИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ В ЗОНАХ ПРОЕКЦИИ ОРГАНОВ – НА КОЖЕ ЛАДОНЕЙ И СТУПНЕЙ НОГ

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА

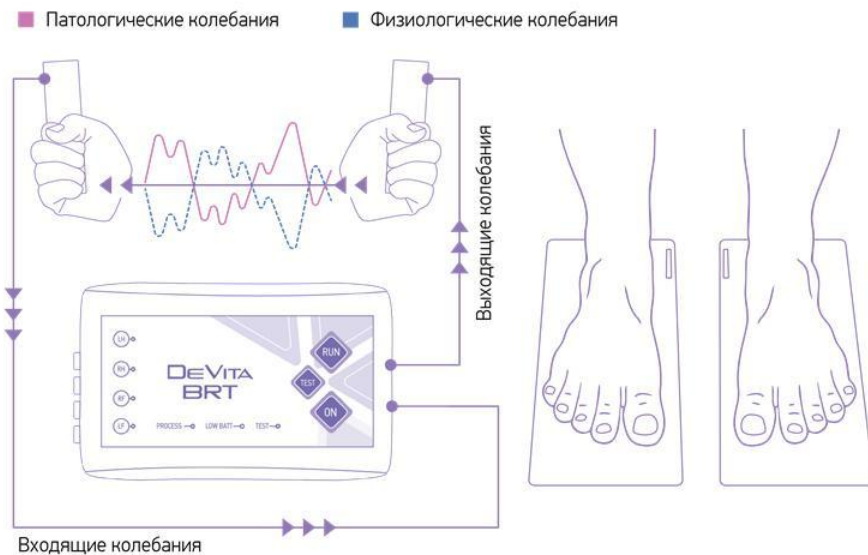

DEVITA BRT

БИОРЕЗОНАНСНАЯ ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МЕТОД



**ПРОСТАЯ СХЕМА
ПОДКЛЮЧЕНИЯ**



**АВТОМАТИЧЕСКАЯ
ПРОГРАММА**



**ЛЕГКОЕ
УПРАВЛЕНИЯ**

ШАГ 1 Считывает собственные электромагнитные колебания человеческого организма

ШАГ 2 Специально обрабатывает их (инвертирует) – нейтрализует дисгармонические (патологические) и усиливает гармонические (физиологические) колебания.

ШАГ 3 Возвращает обратно гармонические (физиологические) колебания в электро-магнитный контур человека.





DEVITA BRT

БИОРЕЗОНАНСНАЯ ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ

НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО СЕАНСА ОЗДОРОВЛЕНИЯ



ЗА СУТКИ ДО ПРОВЕДЕНИЯ СЕАНСА ИСКЛЮЧИТЕ КУРЕНИЕ, ПРИЕМ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ И КОФЕ



ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ СЕАНСА РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВЕСТИ КОМПЛЕКСНУЮ ОЦЕНКУ СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА DEPULS+



МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЕАНСА НЕ ДОЛЖНО ИМЕТЬ ГЕОПАТОГЕННОГО, ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО И ДРУГИХ ВИДОВ ОТЯГОЩЕНИЙ



РАБОТАЮЩИЕ ЭЛЕКТРО-БЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ НЕ БЛИЖЕ, ЧЕМ 0,5 МЕТРОВ ОТ МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ СЕАНСА



ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОДЕЖДУ ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ ТКАНЕЙ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ НАКОПЛЕНИЯ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА



ДЛЯ ЛУЧШЕГО КОНТАКТА ЛАДОНЕЙ И СТУПНЕЙ С ЭЛЕКТРОДАМИ ПРИБОРА УВЛАЖНИТЕ ПОВЕРХНОСТЬ ЭЛЕКТРОДОВ ВЛАЖНОЙ САЛФЕТКОЙ, НЕ СОДЕРЖАЩЕЙ СПИРТА И ОТДУШЕК

DEVITA BRT

БИОРЕЗОНАНСНАЯ ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ

МЕТОДИКА СОВМЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ DEVITA ДЛЯ СОВЕРШЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА ОЗДОРОВЛЕНИЯ

DEVITA RITM MINI

Программа:

- Активная защита
- Антистресс
- Регуляция кровообращения
- Пищеварение
- Детоксикация



DEVITA ENERGY MINI

Программа:

- Энергия жизни

ШАГ 1

ВЫБЕРИТЕ НА ЦИФРОВОМ УСТРОЙСТВЕ DEVITA RITM MINI ИЛИ DEVITA ENERGY MINI ОДНУ ИЗ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ПРОГРАММ

ШАГ 2

ВО ВРЕМЯ СЕАНСА БИОРЕЗОНАНСНОЙ ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ВКЛЮЧИТЕ ВЫБРАННУЮ ПРОГРАММУ

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОДНОВРЕМЕННО УСТРОЙСТВА DEVITA RITM MINI И DEVITA ENERGY MINI!